

Указания за употреба на Kesimpta® писалка Sensoready®

Важно е да разберете и следвате тези указания за употреба преди да инжектирате **Kesimpta**. Свържете се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако имате въпроси, преди да използвате **Kesimpta** за първи път.

ЗАПОМНЕТЕ:

- **Не използвайте** писалката, ако целостта на външната опаковка или на писалката е нарушена. Съхранявайте писалката в запечатаната картонена опаковка, докато не сте готови да я използвате.
- **Не разклащайте** писалката.
- Ако писалката Ви падне на земята, **не я използвайте**, ако изглежда повредена, или ако сте я изпуснали със свалена капачка.
- Изхвърлете използваната писалка веднага след употреба. **Не използвайте повторно писалката**. Вижте „Как трябва да изхвърля използваната Kesimpta писалка Sensoready“ в края на тези Указания за употреба.

КАК ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМ KESIMPTA

- Съхранявайте картонената опаковка с писалката в хладилник между 2°C и 8°C.
- Съхранявайте писалката в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате, за да се предпази от светлина.
- **Не замразявайте** писалката.

Съхранявайте Kesimpta на място, недостъпно за деца.

ЧАСТИ НА KESIMPTA ПИСАЛКА SENSOREADY (ВИЖТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ А):



Kesimpta писалка Sensoready е показана със свалена капачка. **Не** сваляйте капачката докато не сте готови за инжектиране.

КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО ЗА ВАШАТА ИНЖЕКЦИЯ:

Включено в опаковката:


- нова Kesimpta писалка Sensoready (вижте **Изображение Б**)

Невключени в опаковката (вижте **Изображение В**):


- 1 тампон, напоен със спирт
- 1 памучен тампон или марля
- контейнер за изхвърляне на остри предмети

Вижте „Как трябва да изхвърля използваната Kesimpta писалка Sensoready“ в края на тези Указания за употреба.

Изображение Б

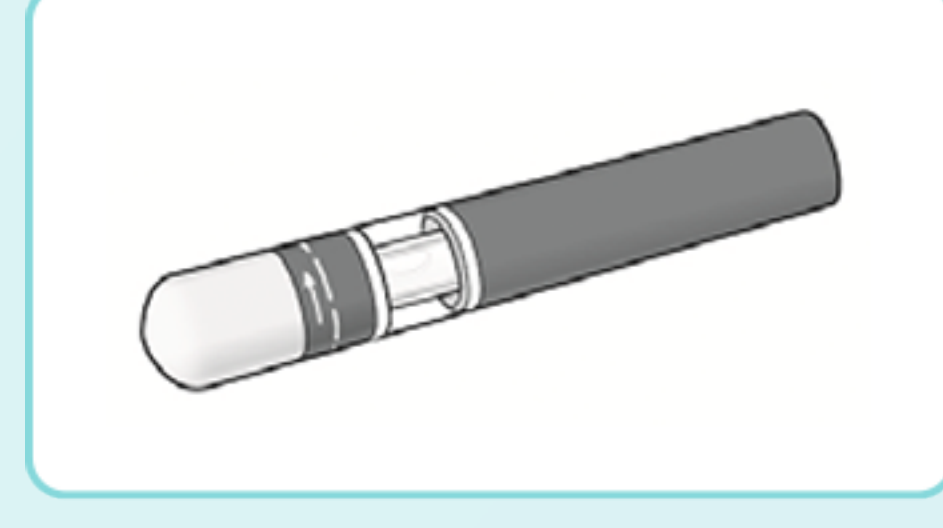

Изображение В

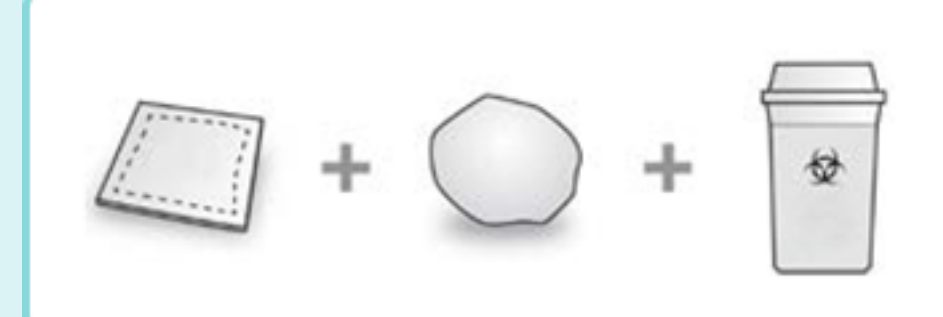

ПРЕДИ ПОСТАВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИЯТА:

Извадете писалката от хладилника **15 до 30 минути преди поставяне на инжекцията**, за да може да достигне стайна температура.

Стъпка 1. Важни проверки, свързани с безопасността, преди да си поставите инжекцията (вижте Изображение Г):

- Погледнете през прозорчето за наблюдение. Течността трябва да бъде бистра до леко опалесцентна. **Не използвайте**, ако течността съдържа видими частици или ако е мътна. Може да видите малко въздушно мехурче, което е нормално.
- Проверете **срока на годност (EXP)** върху Вашата писалка. **Не използвайте** Вашата писалка, ако срокът на годност е изтекъл.

Свържете се с Вашия фармацевт или лекар, ако при някоя от тези проверки на Вашата писалка се установи нещо нередно.


Стъпка 2. Изберете си място на инжектиране:

- Препоръчителното място е предната част на бедрата. Можете също така да използвате областта в долната част на корема, но **не** и в областта на 5 cm около пъпа (вижте **Изображение Д**).
- Всеки път избирайте различно място, когато инжектирате Kesimpta.
- **Не прилагайте инжекцията** в области, където кожата е болезнена, насинена, зачервена, бели се или е втвърдена. Избягвайте области с белези или стрии, или инфектирани места.
- Ако **болногледач** или **медицинско лице** Ви прилага инжекцията, може да се използва също така и горната външна част на ръката (вижте **Изображение Е**).


Изображение Г



Изображение Д

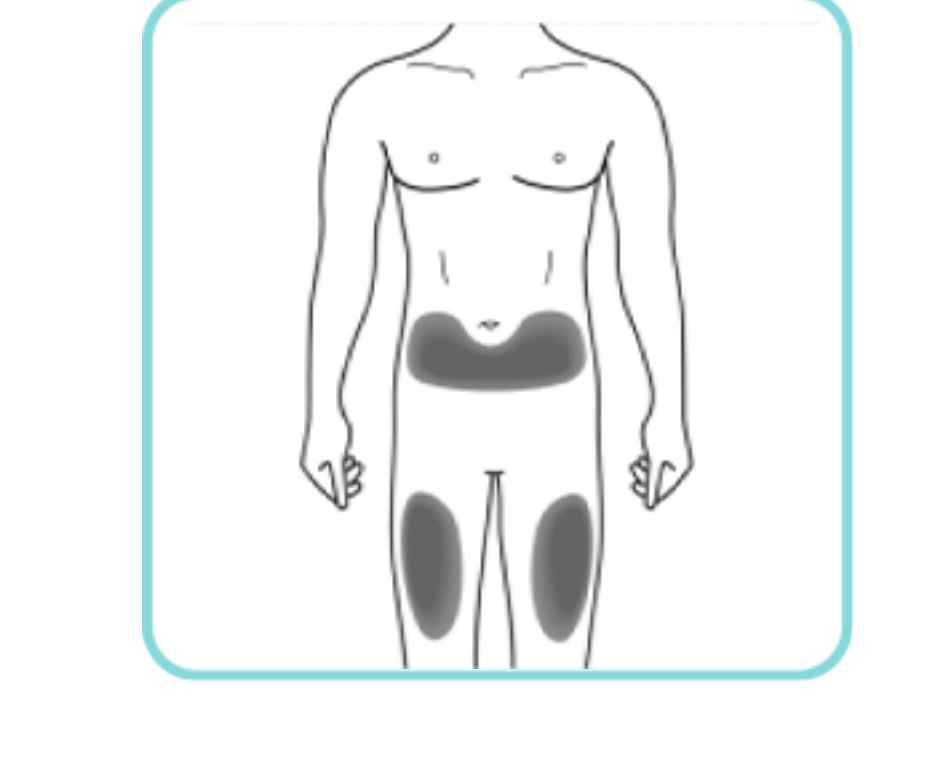


Изображение Е
(само в случай, че се поставя от
болногледач или медицинско лице)

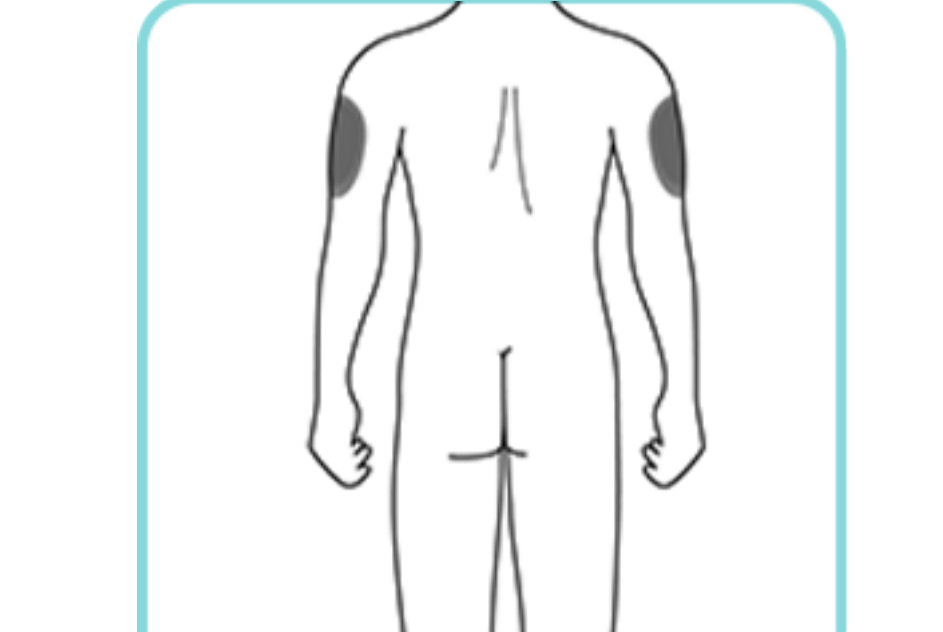

Стъпка 3. Почистяване на мястото на инжектиране:

- Измийте ръцете си със сапун и вода.
- Чрез кръгови движения почистете мястото за инжектиране с тампона, напоен със спирт. Изчакайте мястото да изсъхне преди прилагане на инжекцията (вижте **Изображение Ж**).
- Не докосвайте почистената област преди поставяне на инжекцията.

Изображение Ж

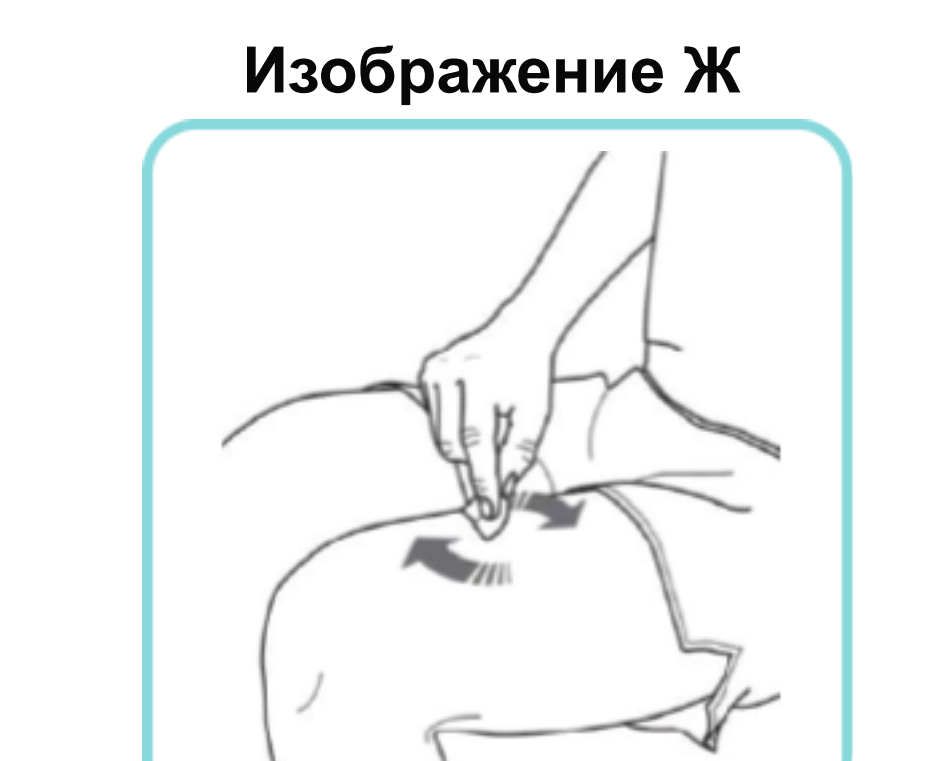

ВАШАТА ИНЖЕКЦИЯ

Стъпка 4. Махнете капачката:

- Махнете капачката само, когато сте готови да използвате писалката.
- Завъртете капачката по посока на часовниковата стрелка (вижте **Изображение З**).
- След като свалите капачката, я изхвърлете. **Не се опитвайте да я поставите отново**.
- Използвайте писалката в рамките на 5 минути след махането на капачката.

Възможно е да видите няколко капки от лекарството да се появят на върха на иглата. Това е нормално.

Стъпка 5. Как се държи писалката:

- Дръжте писалката под ъгъл 90 градуса спрямо почистеното място на инжектиране (вижте **Изображение И**).



Изображение З



Изображение И



Важно: По време на инжектирането ще чуете 2 силни щраквания:

- **Първото щракване** показва, че **инжектирането е започнало**.
- **Второто щракване** показва, че **инжектирането е почти завършено**.

Трябва да продължите да притискате писалката плътно към кожата, докато **зеленият индикатор** изпълни прозорчето за наблюдение и спре да се движи.

Стъпка 6. Започване на инжектирането:

- Притиснете писалката плътно към кожата, за да започнете инжектирането (вижте **Изображение Й**).
- **Първото щракване** показва, че инжектирането е започнало.
- **Продължете да притискате** писалката плътно към кожата.
- **Зеленият индикатор** показва напредването на инжектирането.

Изображение Й




Стъпка 7. Завършване на инжектирането:

- Заслушайте се да чуете **второто щракване**. То показва, че инжектирането е **почти завършено**.
- Проверете дали **зеленият индикатор** е изпълнил прозорчето за наблюдение и дали е спрял да се движи (вижте **Изображение К**).
- Вече може да махнете писалката (вижте **Изображение Л**).

Изображение К



Изображение Л

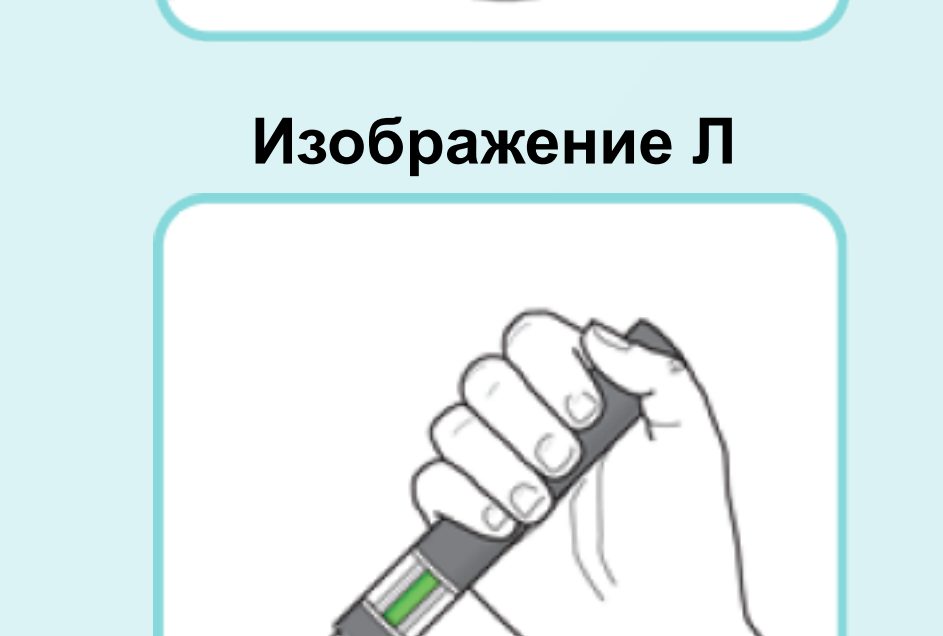

СЛЕД ПОСТАВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИЯТА:

- Ако зеленият индикатор не е изпълнил прозорчето, това означава, че не сте получили цялата доза. Свържете се с Вашия лекар или фармацевт, ако зеленият индикатор не се вижда.
- Възможно е да има малко количество кръв на мястото на инжектиране. Можете да поставите памучен тампон или марля върху мястото и да притиснете за 10 секунди. Не разтривайте мястото на инжектиране. Можете да го покриете с малка лепенка, ако кръвенето продължи.

КАК ТРЯБВА ДА ИЗХВЪРЛЯ ИЗПОЛЗВАНАТА KESIMPTA ПИСАЛКА SENSOREADY

Стъпка 8. Изхвърляне на Вашата Kesimpta писалка Sensoready:

- Изхвърлете използваната писалка в контейнер за изхвърляне на остри предмети (т.е. устойчив на пробиване контейнер, който се затваря или подобен на него) (вижте **Изображение М**).
- Никога не се опитвайте да използвате повторно Вашата писалка.

Съхранявайте контейнера за изхвърляне на остри предмети на място, недостъпно за деца.

Изображение М

