

Navodila za uporabo zdravila Kesimpta® v napolnjenem injekcijskem peresniku Sensoready® Pen

Pomembno je, da pred apliciranjem zdravila Kesimpta razumete in upoštevate naslednja navodila za uporabo. Če imate pred prvo uporabo zdravila Kesimpta kakršnakoli vprašanja, se pogovorite z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

NE POZABITE:


- Če zunanja škatla ali injekcijski peresnik nista originalno zaprta, injekcijskega peresnika **ne uporabljajte**. Injekcijski peresnik vzemite iz originalno zaprte zunanje škatle šele takrat, ko boste pripravljeni na apliciranje.
- Injekcijskega peresnika **ne stresajte**.
- Injekcijskega peresnika **ne uporabljajte**, če vam pade iz rok in je videti poškodovan ali če vam pade iz rok s snetim pokrovčkom.
- Uporabljen injekcijski peresnik zavrzite takoj po uporabi. **Injekcijskega peresnika ne smete ponovno uporabiti**. Glejte besedilo pod naslovom "Kako je treba zavreči uporabljen zdravilo Kesimpta v injekcijskem peresniku Sensoready Pen" na koncu teh navodil za

KAKO JE TREBA SHRANJEVATI ZDRAVILO KESIMPTA

- Škatlo z injekcijskim peresnikom shranjujte v hladilniku pri temperaturi od 2 °C do 8 °C.
- Za zagotovitev zaščite pred svetlobo shranjujte injekcijski peresnik v originalni škatli in ga vzemite iz nje šele tik pred uporabo.
- Injekcijskega peresnika **ne zamrzujte**.

Zdravilo Kesimpta shranjujte nedosegljivo otrokom.

SESTAVNI DELI ZDRAVILA KESIMPTA V INJEKCIJSKEM PERESNIKU SENSOREADY PEN (glejte Sliko A):

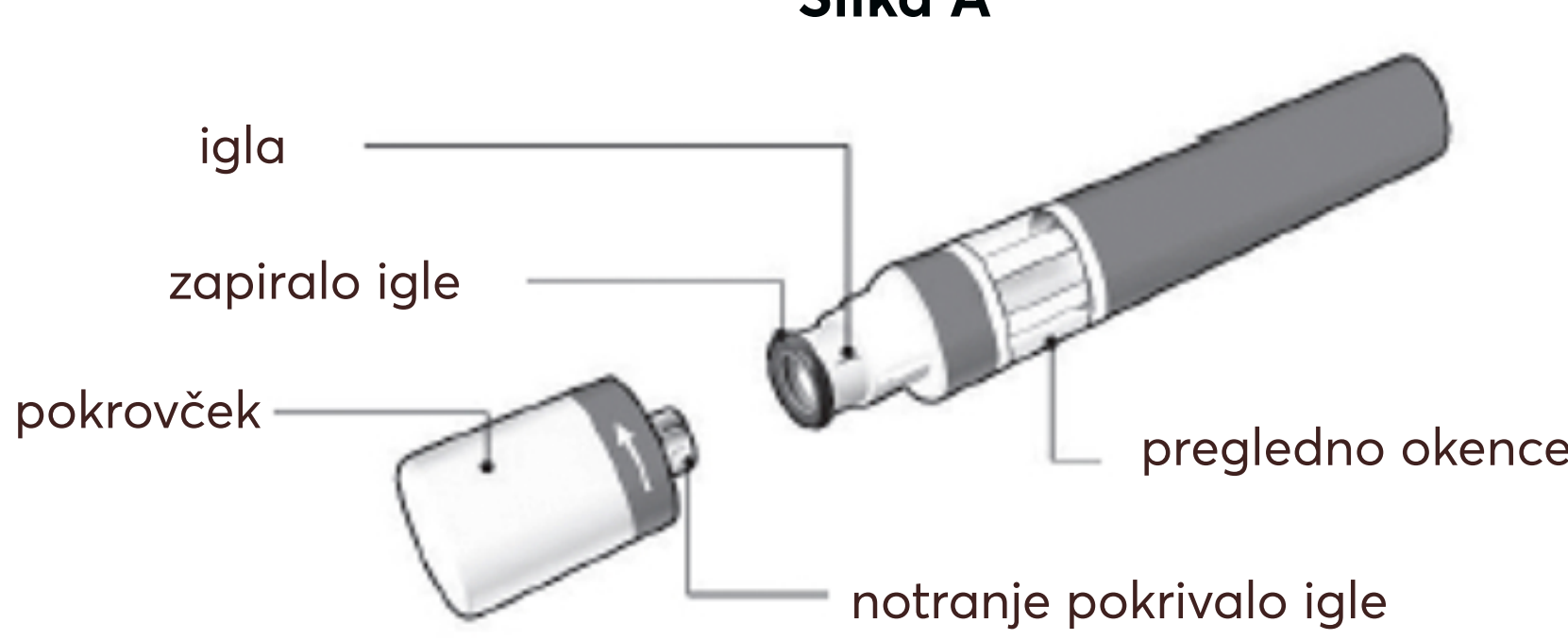


Na sliki je zdravilo Kesimpta v injekcijskem peresniku Sensoready Pen s snetim pokrovčkom. Pokrovček snemite šele **tik pred** apliciranjem.

KAJ POTREBUJETE ZA INJICIRANJE:

V škatli je:

- nov injekcijski peresnik Sensoready Pen zdravila Kesimpta (glejte sliko B)

Slika B

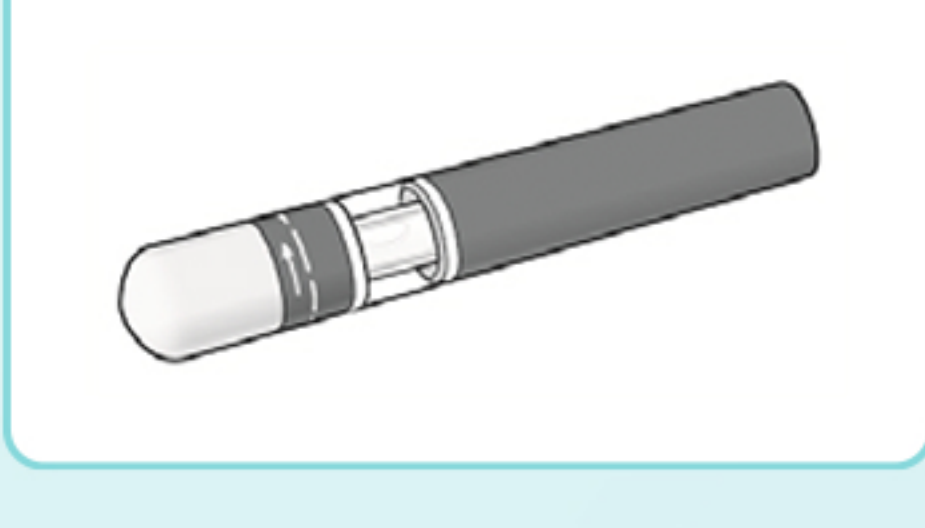

Pripomočki, ki niso priloženi (glejte sliko C):

- 1 alkoholni zloženec
- 1 kos vate ali zloženec iz gaze
- zbiralnik za ostre predmete

Slika C



Glejte besedilo pod naslovom "Kako je treba zavreči uporabljen zdravilo Kesimpta v injekcijskem peresniku Sensoready Pen" na koncu teh navodil za uporabo.


PRED APLICIRANJEM:

Vzemite injekcijski peresnik iz hladilnika **15 do 30 minut pred apliciranjem**, da se lahko ogreje na sobno temperaturo.

1. korak: Kaj je treba preveriti pred apliciranjem (glejte sliko D):

- Oglejte si pregledno okence. Tekočina mora biti bistra do rahlo opalescentna. Če so v tekočini prisotni vidni delci ali če je tekočina motna, injekcijskega peresnika **ne uporabljajte**. Lahko opazite majhen zračni mehurček, kar je normalno.
 - Preglejte **datum izteka roka uporabnosti (EXP)** na injekcijskem peresniku. Injekcijskega peresnika **ne uporabljajte**, če mu je potekel rok uporabnosti.
- Če pri opisanem pregledu ugotovite, da injekcijski peresnik ni ustrezen, se obrnite na farmacevta ali zdravstveno osebje.


Slika D

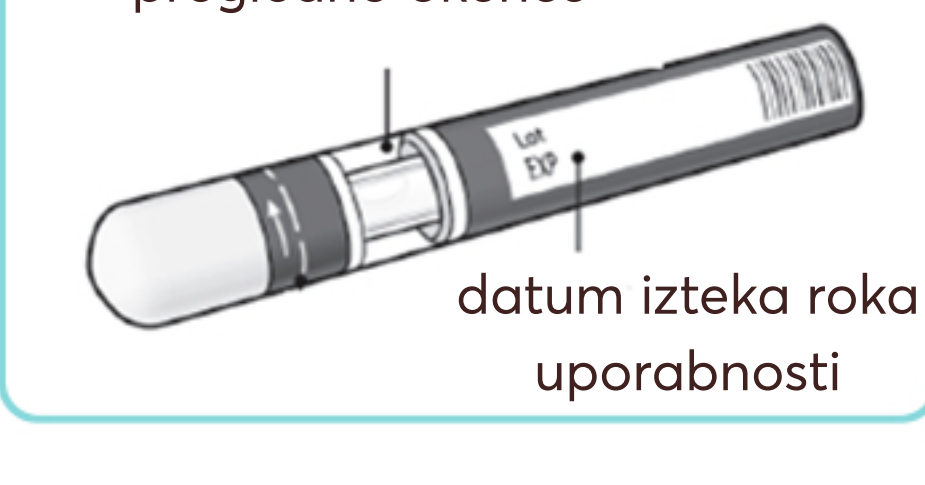


2. korak: Izberite mesto apliciranja:

- Priporočeno mesto apliciranja je na sprednjem delu stegen. Zdravilo lahko aplicirate tudi na spodnjem delu trebuha, vendar ne v predelu, oddaljenem 5 centimetrov ali manj od popka (glejte sliko E).
- Vsakokrat, ko si aplicirate zdravilo Kesimpta, izberite drugo mesto na koži.
- **Zdravila ne aplicirajte** v predele, kjer je koža bolj občutljiva, podpluta, rdeča, luskasta ali trda. Prav tako se izogibajte predelom z brazgotinami ali strijami in okuženim predelom kože.
 - Če vam injekcijo daje **negovalec** ali **zdravstveni delavec**, lahko zdravilo aplicira tudi na zunanji strani nadlakti (glejte sliko F).

Slika E

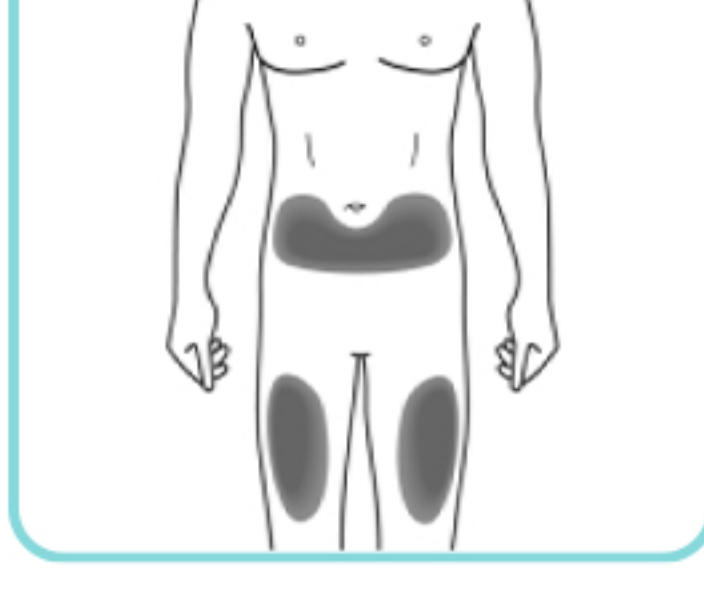

Slika F (samo za negovalce in zdravstveno osebje)

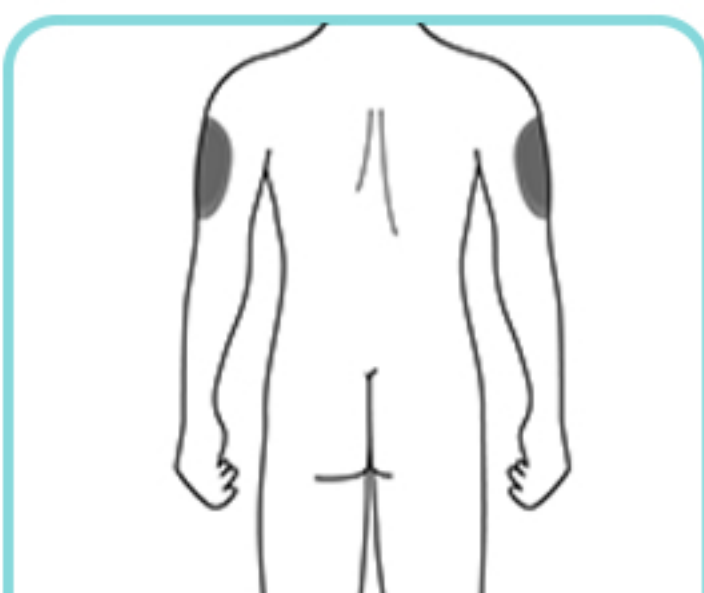

3. korak: Očistite mesto apliciranja:

- Roke si umijte z milom in vodo.
- Uporabite alkoholni zloženec in s krožnimi gibi očistite mesto apliciranja. Pred apliciranjem naj se koža posuši (glejte sliko G).
- Do apliciranja se očiščenega mesta ne dotikajte več.

Slika G




APLICIRANJE

4. korak: Snemite pokrovček:

- Pokrovček snemite šele takrat, ko boste pripravljeni na uporabo injekcijskega peresnika.
- Pokrovček zasukajte v smeri puščice (glejte sliko H).
- Pokrovček zavrzite. **Ne poskušajte ga namestiti nazaj na injekcijski peresnik**.
- Po odstranitvi pokrovčka morate injekcijski peresnik uporabiti v roku 5 minut.


Če opazite, da je iz igle izteklo nekaj kapljic zdravila, naj vas ne skrbi: to je normalno.

Slika H

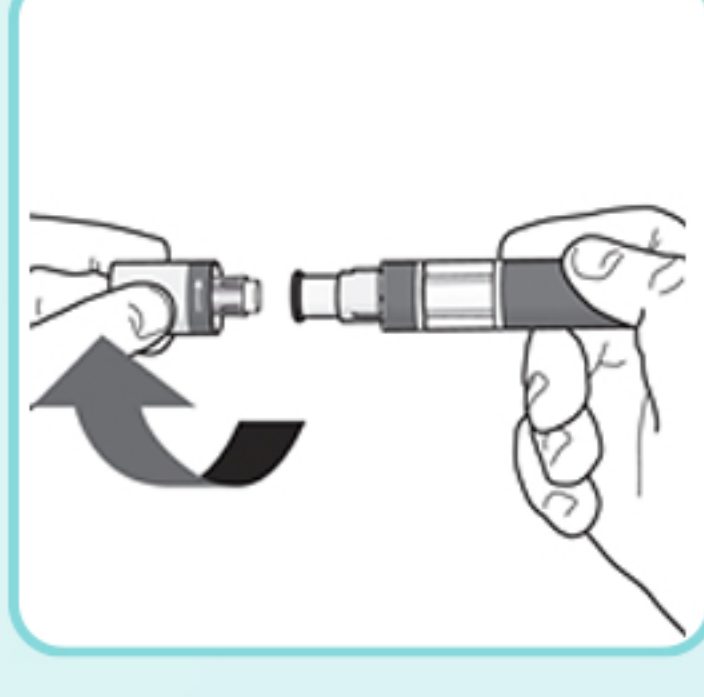

5. korak: Kako držati injekcijski peresnik:

- Injekcijski peresnik držite pravokotno nad očiščenim mestom apliciranja (pod kotom 90 stopinj) (glejte sliko I).

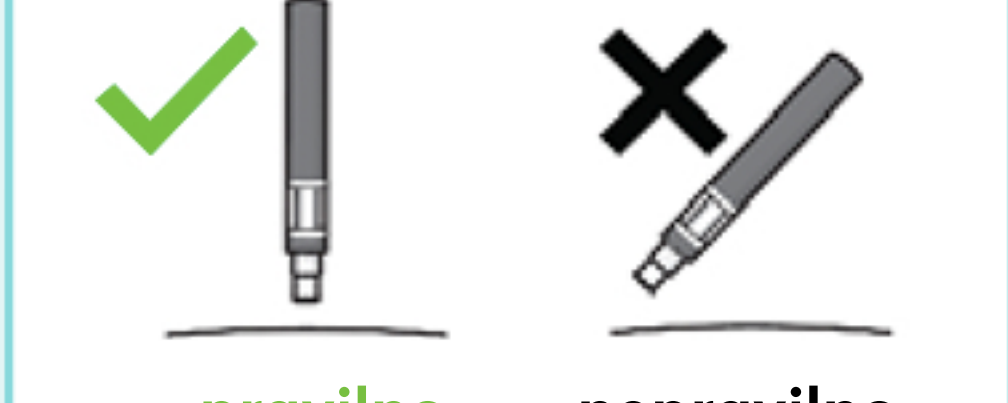

Slika I



Pomembno: Med apliciranjem boste slišali 2 glasna klika:

- **Prvi klik** pomeni, da se je apliciranje začelo.
- **Drugi klik** pomeni, da je apliciranje skoraj končano.

Injekcijski peresnik še naprej močno pritiskajte v kožo, dokler **zeleni indikator** povsem ne zapolni okenca in se neha premikati.

6. korak: Začnite aplicirati:

- Injekcijski peresnik močno pritisnite proti koži, da se apliciranje lahko začne (glejte sliko J).
- **Prvi klik** pomeni, da se je apliciranje začelo.
- Injekcijski peresnik **še naprej močno pritiskajte** v kožo.
- **Zeleni indikator** kaže potek apliciranja.

Slika J



Slika K



Slika L



7. korak: Zaključite apliciranje:

- Počakajte na **drugi klik**. Ta pomeni, da je apliciranje skoraj končano.
- Preglejte, ali je zeleni indikator zapolnil okence in se nehal premikati (glejte sliko K).
- Zdaj lahko injekcijski peresnik odstranite s kože (glejte sliko L).

KAKO JE TREBA ZAVREČI UPORABLJENO ZDRAVILO KESIMPTA V INJEKCIJSKEM PERESNIKU SENSOREADY PEN

8. korak: Injekcijski peresnik Sensoready Pen z zdravilom Kesimpta morate zavreči:

- Odvrzite uporabljen injekcijski peresnik v zbiralnik za ostre predmete (v zabojnik, ki ga je mogoče zapreti in je narejen iz materiala, ki ga ni mogoče preboiti, ali v podoben zabojnik) (glejte sliko M).
- Injekcijskega peresnika nikoli ne poskušajte uporabiti ponovno.

Zbiralnik za ostre predmete shranjujte nedosegljivo otrokom.

Slika M

